

Foot/Ankle
(Revised: 11/22/22)

ARABIC

الاستخدام تعليمات

1. ذلك من وأكثر والكاحل والقدم والساق والركبة والذراعين والظهر الكتفين من والشفاء الألام تخفيف في المستهدف بالاهتزاز العلاج يساعد.
2. مخصصة راحة الاهتزاز من متميزة مستويات ثلاثة توفر.
3. الجسم أجزاء مختلف ليناسب ومصمم عالمي حجم.
4. الفيلكرو بإغلاق مكانه في الشريط لتثبيت الشريط واضبط ، العلاج غلاف في المحور أدخل.
5. أزرق ضوء يضيء حتى ثانيتين لمدة النطاق جانب على الموجود الزر على الضغط سوى عليك ما ، للتشغيل.
6. المطلوبة الاهتزاز مستويات بين للتبديل أخرى مرة الزر على اضغط . التردد منخفض اهتزاز لبدء واحدة مرة الزر على اضغط .
7. الألام تخفيف من قدر أقصى على للحصول دقيقة 45 - 25 لمدة بالاهتزاز العلاج استخدم .
8. التشغيل لإيقاف ثانيتين لمدة الزر على باستمرار الضغط سوى عليك ما ، الانتهاء عند .
9. الشحن بمنفذ USB شاحن توصيل طريق عن البطارية بتجديد قم .
10. الحاجة حسب نظيفة بقعة .
11. الهواء في لتجف وتترك مسطح بشكل توضع .
12. التنظيف أثناء جافاً الشاحن فتح على حافظ .
13. الجاف التنظيف تستخدم لا .

100% نايلون ظهر ، مطاطي رغوي قلب ، بوتادين ستايرين 100% لدنة ألياف 18% / نايلون 82%:الخامة

DANISH

Brugsanvisning

1. Måltrettet vibrationsterapi hjælper med smertelindring og restitution for dine skuldre, ryg, arme, knæ, læg, fod, ankel og meget mere.
2. Tre forskellige vibrationsniveauer giver skræddersyet aflastning.
3. Universelt størrelse og designet til at passe til forskellige kropsdele.
4. Snap HUB ind i terapiviklen, juster remmen for at holde båndet på plads med velcrolukning.
5. For at tænde skal du blot holde knappen på siden af båndet nede i 2 sekunder, indtil et blåt lys lyser.
6. Tryk én gang på knappen for at starte lavfrekvent vibration. Tryk på knappen igen for at skifte mellem de ønskede vibrationsniveauer.
7. Anvend vibrationsterapi i 25 - 45 minutter for maksimalt niveau af smertelindring.
8. Når du er færdig, skal du blot holde knappen nede i 2 sekunder for at slukke.
9. Genopfyld batteriet ved at sætte USB-opladeren i ladeporten.
10. Plet rent efter behov.
11. Læg fladt og lad det lufttørre.
12. Hold opladeråbningen tør under rengøring.
13. Må ikke renses.

Materiale: 82% nylon / 18% spandex bunke 100% styren-butadien, gummi skum kerne, 100% nylon bagside

DUTCH

Gebruiksaanwijzing

1. Gerichte vibratietherapie helpt bij pijnverlichting en herstel van uw schouders, rug, armen, knie, kuit, voet, enkel en meer.
2. Drie verschillende trillingsniveaus bieden op maat gemaakte verlichting.
3. Universeel formaat en ontworpen om op verschillende lichaamsdelen te passen.
4. Klik de HUB in de therapiewikkel, pas de band aan om de band op zijn plaats te houden met klittenbandsluiting.
5. Om in te schakelen, houdt u de knop aan de zijkant van de band 2 seconden ingedrukt totdat een blauw lampje gaat branden.
6. Druk eenmaal op de knop om de laagfrequente trillingen te starten. Druk nogmaals op de knop om tussen de gewenste trillingsniveaus te wisselen.
7. Pas vibratietherapie toe gedurende 25 - 45 minuten voor maximale pijnverlichting.
8. Als u klaar bent, houdt u de knop 2 seconden ingedrukt om uit te schakelen.
9. Vul de batterij bij door de USB-oplader in de oplaadpoort te steken.
10. Spot schoon als dat nodig is.
11. Leg plat en laat aan de lucht drogen.
12. Houd de opening van de oplader droog tijdens het schoonmaken.
13. Niet stomen.

Materiaal: 82% nylon / 18% spandex stapel 100% styreen-butadieen, schuimrubberen kern, 100% nylon achterkant

ENGLISH

Instructions for Use

1. Targeted vibration therapy aids in pain relief and recovery for your shoulders, back, arms, knee, calf, foot, ankle and more.
2. Three distinct levels of vibration offer customized relief.
3. Universally sized and designed to fit various body parts.
4. Snap HUB into therapy wrap, adjust strap to hold band in place with velcro closure.
5. To turn on, simply hold button on side of the band for 2 seconds until a blue light is illuminated.
6. Press button once to begin low frequency vibration. Press button again to toggle between desired vibration levels.
7. Apply vibration therapy for 25 - 45 minutes for maximum level of pain relief.
8. When finished, simply hold button down for 2 seconds to turn off.
9. Replenish battery by plugging USB charger into the charge port.
10. Spot clean as needed.
11. Lay flat and allow to air dry.
12. Keep charger opening dry while cleaning.
13. Do not dry clean.

Material: 82% Nylon / 18% Spandex Pile 100% Styrene-butadiene, Rubber Foam Core, 100% Nylon Back



© 2022 Brownmed - Intellinetix is a registered trademark of Brownmed (877) 853-5518 U.S. Patent #14/011,838

Rev. 0



FRENCH

1. La thérapie par vibration ciblée aide à soulager la douleur et à récupérer vos épaules, votre dos, vos bras, vos genoux, vos mollets, vos pieds, vos chevilles et plus encore.
2. Trois niveaux distincts de vibration offrent un soulagement personnalisé.
3. Universellement dimensionné et conçu pour s'adapter à diverses parties du corps.
4. Insérez le HUB dans l'enveloppe thérapeutique, ajustez la sangle pour maintenir la bande en place avec une fermeture velcro.
5. Pour allumer, maintenez simplement le bouton sur le côté du bracelet pendant 2 secondes jusqu'à ce qu'un voyant bleu s'allume.
6. Appuyez une fois sur le bouton pour commencer la vibration à basse fréquence. Appuyez à nouveau sur le bouton pour basculer entre les niveaux de vibrations.
7. Appliquez la thérapie par vibration pendant 25 à 45 minutes pour un soulagement maximal de la douleur.
8. Une fois terminé, maintenez simplement le bouton enfoncé pendant 2 secondes pour éteindre.
9. Rechargez la batterie en branchant le chargeur USB dans le port de charge.
10. Nettoyer les taches au besoin.
11. Poser à plat et laisser sécher à l'air.
12. Gardez l'ouverture du chargeur sèche pendant le nettoyage. • Ne pas nettoyer à sec.

Matériau : 82 % nylon/18% élasthanne 100 % styrène-butadiène, âme en mousse de caoutchouc, dos 100 % nylon

GERMAN

Gebrauchsanweisung

1. Eine gezielte Vibrationstherapie hilft bei der Schmerzlinderung und -wiederherstellung für Schultern, Rücken, Arme, Knie, Wade, Fuß, Knöchel und mehr.
2. Drei verschiedene Vibrationsstufen bieten eine individuelle Regulierung.
3. Universell dimensioniert und für verschiedene Körperteile ausgelegt.
4. HUB in die Therapiehülle einrasten lassen, den Gurt so einstellen, dass das Band mit Klettverschluss an Ort und Stelle bleibt.
5. Zum Einschalten halten Sie einfach die Taste an der Seite des Bandes 2 Sekunden lang gedrückt, bis ein blaues Licht aufleuchtet.
6. Drücken Sie die Taste einmal, um die niederfrequente Vibration zu starten. Drücken Sie die Taste erneut, um zwischen den gewünschten Vibrationspegeln umzuschalten.
7. Wenden Sie eine Vibrationstherapie während 25 - 45 Minuten an, um eine maximale Schmerzlinderung zu erzielen.
8. Wenn Sie fertig sind, halten Sie die Taste zum Ausschalten einfach 2 Sekunden lang gedrückt.
9. Laden Sie den Akku wieder auf, indem Sie das USB-Ladegerät an den Ladeanschluss anschließen.
10. Bei Bedarf vor Ort reinigen.
11. Flach legen und an der Luft trocknen lassen.
12. Halten Sie die Ladegerätöffnung während der Reinigung trocken.
13. Das Produkt darf nicht chemisch gereinigt werden. .

Material: 82% Nylon / 18% Spandex- 100% Styrol-Butadien-Kautschukschaumkern 100% Nylon-Rückseite



© 2022 Brownmed - Intellinetix is a registered trademark of Brownmed (877) 853-5518 U.S. Patent #14/011,838

Rev. 0



ITALIAN

Istruzioni per l'uso

1. La terapia vibratoria mirata aiuta nel sollievo dal dolore e nel recupero di spalle, schiena, braccia, ginocchia, polpacci, piedi, caviglie e altro ancora.
2. Tre distinti livelli di vibrazione offrono un sollievo personalizzato.
3. Di dimensioni universali e progettate per adattarsi a varie parti del corpo.
4. Inserisci l'HUB nell'involucro terapeutico, regola la cinghia per tenere la fascia in posizione con la chiusura in velcro.
5. Per accendere, tieni semplicemente premuto il pulsante sul lato del cinturino per 2 secondi fino a quando non si accende una luce blu.
6. Premere il pulsante una volta per avviare la vibrazione a bassa frequenza. Premere di nuovo il pulsante per alternare tra i livelli di vibrazione desiderati.
7. Applicare la terapia vibratoria per 25 - 45 minuti per il massimo livello di sollievo dal dolore.
8. Al termine, tieni semplicemente premuto il pulsante per 2 secondi per spegnere.
9. Ricarica la batteria collegando il caricatore USB alla porta di ricarica.
10. Spot pulito secondo necessità.
11. Stendere e lasciare asciugare all'aria.
12. Tenere asciutta l'apertura del caricatore durante la pulizia.
13. Non lavare a secco.

Material: 82% nylon / 18% pile elasthan 100% stirene-butadiene, anima in schiuma di gomma, dorso 100% nylon

PORTUGUESE

1. Instruções de usoA terapia de vibração direcionada ajuda no alívio da dor e na recuperação dos ombros, costas, braços, joelho, panturrilha, pé, tornozelo e muito mais.
2. Três níveis distintos de vibração oferecem alívio personalizado.
3. De tamanho universal e projetado para caber em várias partes do corpo.
4. Encaixe o HUB no envoltório da terapia, ajuste a alça para segurar a faixa no lugar com fecho de velcro.
5. Para ligar, basta segurar o botão na lateral da pulseira por 2 segundos até que uma luz azul se acenda.
6. Pressione o botão uma vez para iniciar a vibração de baixa frequência. Pressione o botão novamente para alternar entre os desejados níveis de vibração.
7. Aplique terapia de vibração por 25 - 45 minutos para o nível máximo de alívio da dor.
8. Quando terminar, simplesmente mantenha o botão pressionado por 2 segundos para desligar.
9. Reabasteça a bateria conectando o carregador USB na porta de carga.
10. Limpe conforme necessário.
11. Coloque em uma superfície plana e deixe secar ao ar.
12. Mantenha a abertura do carregador seca durante a limpeza. • Não lave a seco.

Material: 82% Nylon / 18% Spandex Pile 100% Styrene-butadiene Rubber Foam Core 100% Nylon Back



© 2022 Brownmed - Intellinetix is a registered trademark of Brownmed (877) 853-5518 U.S. Patent #14/011,838
Rev. 0



SPANISH

Instrucciones de uso

1. La terapia de vibración dirigida ayuda a aliviar el dolor y recuperar los hombros, la espalda, los brazos, la rodilla, la pantorrilla, el pie, el tobillo y más.
2. Tres niveles distintos de vibración ofrecen un alivio personalizado.
3. De tamaño universal y diseñado para adaptarse a varias partes del cuerpo.
4. Encaje el HUB en la envoltura de terapia, ajuste la correa para sujetarla en su lugar con el cierre de velcro.
5. Para encender, simplemente mantenga presionado el botón en el costado de la banda durante 2 segundos hasta que se ilumine una luz azul.
6. Presione el botón una vez para comenzar la vibración de baja frecuencia. Presione el botón nuevamente para alternar entre los niveles de vibración deseados.
7. Aplique la terapia de vibración durante 25 a 45 minutos para obtener el máximo nivel de alivio del dolor.
8. Cuando termine, simplemente mantenga presionado el botón durante 2 segundos para apagarlo.
9. Recargue la batería conectando el cargador USB en el puerto de carga.
10. Limpie las manchas según sea necesario.
11. Coloque plano y deje secar al aire.
12. Mantenga la abertura del cargador seca mientras limpia.
13. No lavar en seco.


Material: 82 % nailon/18 % elastano, 100 % estireno-butadieno, núcleo de espuma de goma, parte trasera 100 % nailon.



© 2022 Brownmed - Intellinetix is a registered trademark of Brownmed (877) 853-5518 U.S. Patent #14/011,838

Rev. 0



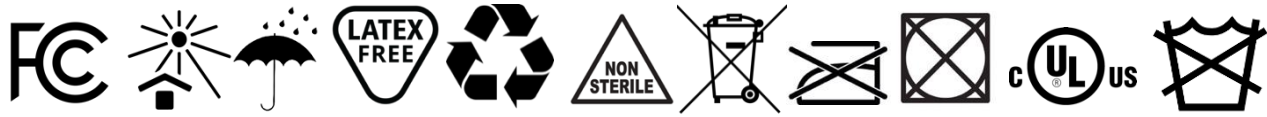

EC REP CE
CEpartner4U
Esdorrielaan 13
3951 DB Maarn
The Netherlands
www.cepartner4u.eu
Manufacturer:
Brownmed
1300 Lundberg Drive West
Spirit Lake, Iowa 51360 U.S.A.

UDI

MD

© 2022 Brownmed - Intellinetix is a registered trademark of Brownmed (877) 853-5518 U.S. Patent #14/011,838 Rev. 0

REF LOT